

Čas automatického vypnutí	30 s
Okolní prostředí	15-40°C, RH≤85% (bez kondenzace), 70kPa-106kPa
Skladování	-20-55°C, RH≤93% (bez kondenzace), 50kPa~106kPa
Rozměry	140x40x40 mm
Váha	95 g, včetně baterií
Baterie	2xAAA, DC 3V
Příslušenství	Uživatelský manuál
Ochrana proti elektrickému šoku	Zařízení s vnitřním napájením
Provozní režim	Kontinuální režim
Očekávaná životnost	5 let

Provozní instrukce

Před měřením tělesné teploty se ujistěte, že jste zvolili správný režim. Stisknutím testovacího tlačítka zapnete zařízení, provede se automatický test a všechny symboly se zobrazí normálně (obrázek 1).

Zařízení musí být používáno ve vzdálenosti 3 až 5 cm od čela pacienta (obrázek 2), stiskněte testovací tlačítko. Po jedné sekundě se zobrazí výsledky (obrázek 3).

Pokud se zařízení 30 sekund nepoužívá, automaticky se vypne.



Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Výkonnostní parametry

Poznámka: Pokud je zařízení používáno jinak než v souladu se specifikacemi, nelze zaručit správnou funkci! Vyhrazujeme si právo provádět technické změny za účelem zlepšení a vývoje produktu. Přesnost tohoto teploměru byla pečlivě zkontrolována a vyvinuta s ohledem na dlouhou životnost.

Pokyny pro kontrolu přesnosti mohou být požadovány u výrobce.

Specifikace

Název produktu	Infračervený teploměr
Model	E122
Rozsah měření	34,0 °C-43,0 °C
Rozšířený rozsah měření	32,0 °C-33,9 °C
Laboratorní přesnost	±0,3 °C (34,0 °C-43,0 °C) ±0,4 °C (32,0 °C-33,9 °C)
Přesnost zobrazení	0,1 °C
Měrné jednotky	°C, °F
Čas měření	1 s

Popis produktu




displej

testovací tlačítko

paměťové tlačítko

tlačítko pro nastavení

tělo teploměru

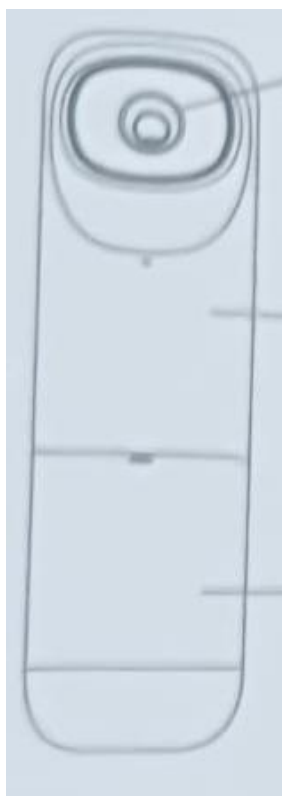

senzor infračerveného snímače

kryt

prostor pro baterie

Tlačítko	Popis
Tlačítko pro nastavení	Multifunkční tlačítko – krátkým stisknutím přepnete možnost měření těla nebo objektu
Paměťové tlačítko	Multifunkční tlačítko – krátkým stisknutím vystoupíte do vyhledávání v paměti
Testovací tlačítko	Multifunkční tlačítko – krátkým stisknutím zahájíte měření

Displej



Pozor


1. Udržujte čočku snímače v čistotě, ničím neblokuje přední část.
2. Chcete-li zachovat přesné měření, počkejte 15–20 minut při přechodu z prostředí s vyšší/níží teplotou vzduchu.
3. Při měření poměrně vysoké nebo relativně nízké teploty objektu počkejte před měřením tělesné teploty deset minut.
4. Pot a skvrny na čele ovlivní přesnost měření. Neměřte tělesnou teplotu 30 minut po jídle, cvičení nebo sprchování.

Přepínání měrných jednotek

Měření je možné v jednotkách: °C / °F. Když je teploměr vynutý, zmáčkněte tlačítko pro nastavení po dobu 3 vteřin. Na obrazovce začne blikat symbol °C / °F. Pokračujte stisknutím tlačítka pro nastavení a vyberte požadovanou možnost a potvrďte testovacím tlačítkem.

Výměna baterií

Pokud se na obrazovce zobrazí symbol baterie, vyměňte baterie. Jinak by mohl být výsledek měření zkreslený. Otevřete přihrádku na baterie, vyjměte vybité baterie a vložte 2 nové baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií.

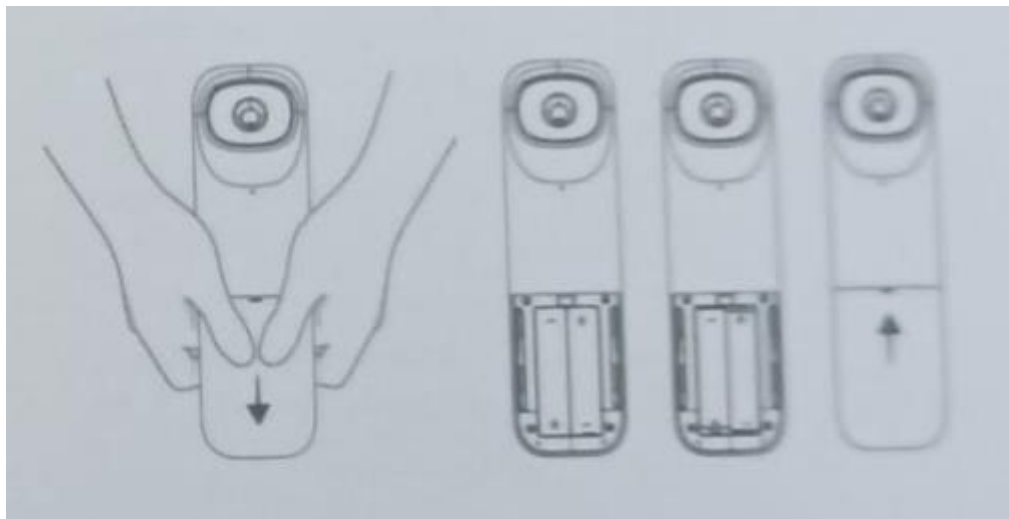

Pozor

1. Vyjměte baterie, pokud se teploměr delší dobu nepoužívá.
2. Nevhazujte použité baterie do ohně.
3. Likvidujte prosím použité baterie v souladu s místními zákony a předpisy.